


1



- 다음이 필요합니다:
 1. 본 설명서,
 2. 기저귀 스왑 키트 그리고
 3. 펜
- 아기의 더러워진 기저귀를 갈아줍니다
- 더러운 기저귀를 일단 한 쪽에 놓아두고 아기를 안전한 위치(예, 아기 침대)에 데려다 놓습니다

2

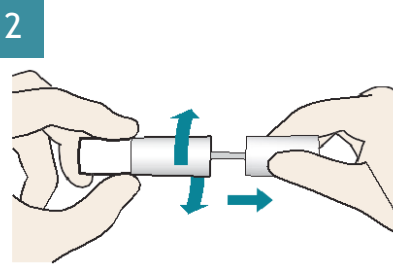


- 단단한 표면에 더러운 기저귀를 놓고 펼칩니다
- 튜브를 돌려 잡아당겨서 엽니다. 그러면 스왑 끝이 노출됩니다
- 스왑 끝이 귀하의 피부나 다른 표면에 닿지 않도록 주의하세요

3




- 스왑 끝으로 살짝, 더러운 기저귀에서 소량의 대변을 채취합니다

4

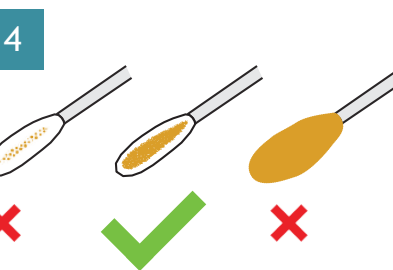


- 대변을 너무 많이 채취하지 마세요
- 스왑 끝이 약간 착색되면 됩니다

5

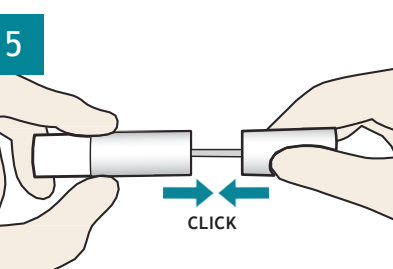


- 스왑을 바로 튜브에 다시 넣습니다
- 스왑 끝이 귀하의 피부나 다른 표면에 닿지 않도록 하세요
- 클릭 소리가 나도록 튜브를 꼭 닫습니다

6

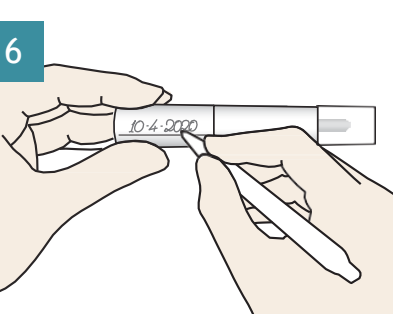

- 튜브에 '채취 일자'라고 쓰인 곳에 날짜를 적습니다 ('Date collected')

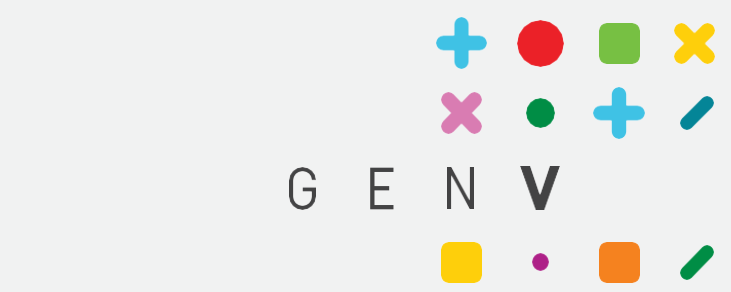

저희는 아동 건강 문제가 해결될 수 있다고 믿습니다.

GenV 기저귀 스왑 설명서


아기 대변 샘플 채취하기

- 시작하기 전에

- 본 설명서를 읽으세요
- **생후 일주일 미만의 신생아?** 생후 7일에 또는 그 후 되도록 빨리 샘플을 채취하세요
- **생후 일주일 이상의 신생아?** 되도록 빨리 샘플을 채취하세요
- **깜빡했거나 채취가 어렵다고요?** 샘플을 언제든지 보내주세요 - 모든 샘플이 중요합니다

- 키트를 분실했거나 실수하셨다고요? - 저희에게 연락하세요:
전화: 1800 436 888 웹사이트: www.genv.org.au

7

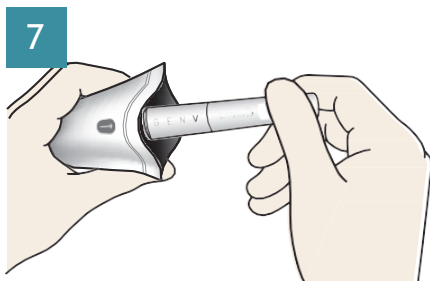

- 튜브를 흰색 봉투에 넣습니다
- 봉투 끝을 눌러서 밀봉하고 이때 되도록 공기가 들어가지 않도록 합니다

8



- 흰색 봉투를 회송용 봉투(수취인 부담)에 넣습니다
- 회송용 봉투를 밀봉합니다
- 이 봉투는 상온에 보관할 수 있습니다 (냉장고나 냉동실 보관 아님)

9



- 이 봉투를 일주일 이내 또는 되도록 빨리 GenV로 보냅니다 - 우표를 붙일 필요 없이 봉투를 우체통에 넣으면 됩니다

V2.0 2022-05-20



역대 가장 건강한 다음 세대를 만드는 데 도움을 주셔서 감사합니다.